

Promotivna ponuda | **Set 4624B**



6 Razloga za Komet.


Komet Dental – Preciznost za potrebe dentalnih stručnjaka.

S više od 100 godina iskustva, Komet Dental isporučuje visokokvalitetne rotacijske instrumente i endodontske sustave kojima vjeruju stručnjaci u više od 100 zemalja. Naša rješenja podržavaju precizne, sigurne i učinkovite dentalne zahvate – čime postajemo vaš pouzdan partner u kliničkoj izvrsnosti i inovacijama.

Sada dostupan: Uvodni Set 4624B

Mudar odabir šest instrumenata – dizajniranih da zadovolje potrebe modernih dentalnih zahvata. Ovaj set odražava širinu Kometovog sveobuhvatnog portfelja rotacijskih instrumenata, nudeći pouzdana rješenja za etablirane postupke i najnovije tehnike

Kao lider u inovacijama, Komet nastavlja oblikovati budućnost dentalne medicine.

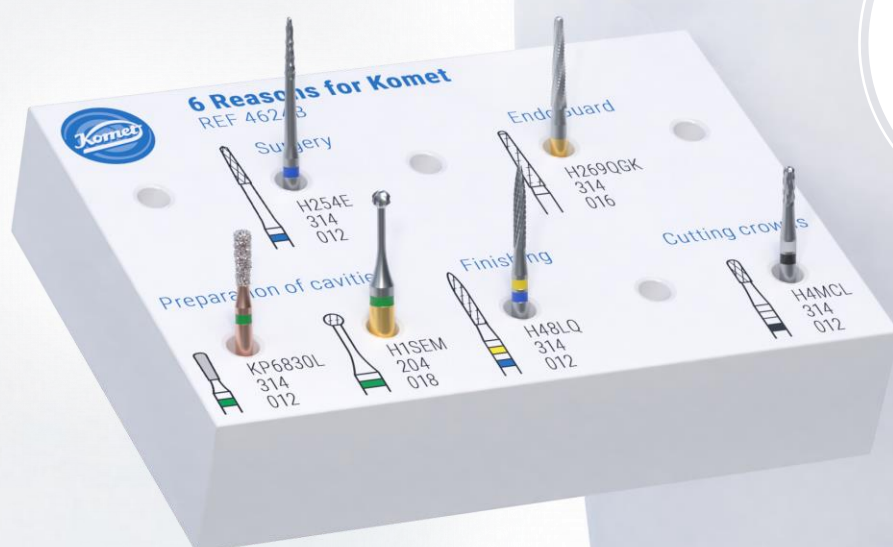

**6 razloga za Komet
uvodni set 4624B**

Posebna ponuda "Crni
petak" 28.11.-

02.12.2025.

30,63 € + PDV

Što ima unutar seta??

Kirurgija:



Mali rezač kosti:

H254E.314.012

Minimalno invazivan, kombinirani instrument za kosti i tvrda zubna tkiva, namijenjen za uklanjanje impaktiranih umnjaka, rad na koštanim površinama, za male rezove u kosti i za apikotomije.

Uputa za primjenu:

- Optimalna brzina u turbini : 314 - (80,000 rpm Primjeni mali
- konatktni pritisak (<2N)
- Koristi obilno hlađenje vodom (min 50 ml/min)

Endodoncija:



EndoGuard.

H269QGK.314.016

EndoGuard uklanja višak dentina i priprema ravan pristup pulpi u sustavu korijenskog kanala. Opremljen je glatkim, nereznim vrhom za zaštitu dna pulpne komore. Zahvaljujući poprečnom zupčanju, EndoGuard omogućuje učinkovit, a istodobno gladak rad uz savršenu kontrolu

Uputa za primjenu:

- Optimalna brzina: (20,000 rpm
- Primjeni mali konatktni pritisak

Preparacija kaviteta

DIAO. Inovacija koju možeš osjetiti.

KP6830L.314.012



Kao inovacija za preparaciju krunica i mostova, Kometovo DIAO svrdlo impresioniralo je korisnike diljem svijeta svojom izvanrednom i dugotrajnom oštrinom te optimalnom kontrolom. Sada je Komet proširio asortiman DIAO-a na više primjena, omogućujući stomatolozima da iskoriste vrhunske performanse DIAO-a i pri preparaciji kaviteta.

Uputa za primjenu:

- Optimalna brzina: (160,000 rpm
- preferirano u crvenom kolječniku. (300,000 rpm moguća je uz rad sa turbinom).

Preparacija

Ekskavator

H1SEM.204.018



H1SEM karbidno svrdlo ima inovativno hibridno ozubljenje koje smanjuje vibracije i povećava udobnost tretmana. Njegov oštar vrh i okrugli oblik omogućuju brzu, konzervativnu ekskavaciju, dok tanak, stabilan vrat podržava minimalno invazivne zahvate – idealan za korištenje s alatima za povećanje radi maksimalne preciznosti

Uputa za primjenu:

- Optimalna brzina (1,000 – 1,500 rpm
- Da bi se smanjio rizik od termički uzrokovane traumatizacije pulpe, preporučujemo da ekskavaciju izvodite bez pritiska. Radite malom brzinom .

Obrada:

Finirer za kompozit.

H48LQ.314.012



Učinkovita završna obrada kompozitnih materijala. Zahvaljujući posebnom ozubljenju, koje je idealno prilagođeno za rad na kompozitnim ispunima, Q-finireri ostvaruju izvanrednu kvalitetu površine.

Uputa za primjenu

- Optimalna brzina: (20,000 rpm uz
- hlađenje vodom (min 50 ml/min)
- Primjeni mali kontaktni pritisak (<2N)

Rezač krunica:

Rezač krunica .

H4MCL.314.012



H4MCL omogućuje brzu i učinkovitu separaciju svih uobičajeno korištenih metalnih legura, titana i faseta od keramike niske fuzije.

Uputa za primjenu:

- Preporučamo primjenu svrdla pod kutem 45° Optimalna brzina: (
- 160,000 rpm uz hlađenje vodom
- (min 50 ml/min)
- Primjeni mali kontaktni pritisak (<2N)

Narudžbe i dodatne obavijesti: Prodaja Dental telefon : 01 2396 760 e-mail: dental@mtf.hr ili vaš prodajni predstavnik